



MANUALE D'USO



choose your language

DESCRIZIONE E SPECIFICHE DEI DISPOSITIVI

La linea **SBI** è indicata per il trattamento di alterazioni della morfologia del piede.

INTRODUZIONE

La ditta **Optima Molliter S.r.l.** dichiara che i tutori SBI sono dispositivi medici concepiti e progettati secondo lo stato dell'arte, sono stati controllati e resi conformi al Regolamento UE 2017/ 745 per le parti applicabili. Nonostante ciò, è importante considerare che un uso non idoneo e la sottovalutazione dei pericoli che può comportare, possono essere causa di infortuni o danni. Prima di utilizzare SBI, leggere attentamente ed in modo completo le seguenti istruzioni. La corretta applicazione è essenziale per l'efficace funzionamento del dispositivo.

DESTINAZIONE D'USO

SBI MOTUS

- Trattamento post-operatorio della ferita plantare.
- Ulcera diabetica plantare / ulcera plantare.
- Riabilitazione post-amputazione minore (eccetto amputazioni Lisfranc e Chopart).
- Gestione del piede di Charcot nella fase di conversione da acuto a cronico.

SBI FRAME

- Stabilizzazione del piede.
- Frattura della caviglia / gravi distorsioni della caviglia.
- Frattura del metatarso, uso post-operatorio.

SBI W-HEEL

- Gestione del trauma o della ferita/ulcera del tallone e del tendine.
- Gestione dell'ulcera / ferita del tallone (sia plantare che dorsale) e del Tendine d'Achille.
- Ulcera da decubito del tallone (sia plantare che dorsale).
- Riabilitazione post-operatoria del tallone/ Tendine d'Achille.

PLANTARE SBI 3x3

- Redistribuzione della pressione plantare in caso di ulcera da pressione su avampiede, mesopiede e tallone / decompressione personalizzata di specifiche aree, con 27 differenti combinazioni di decompressione.

PLANTARE SBI PLTM

- Protezione del piede amputato migliorandone la posizione all'interno del tutore.

EFFETTI COLLATERALI E AVVERTENZE

Non sono stati registrati effetti collaterali legati all'utilizzo dei dispositivi. Si consiglia di non utilizzare il dispositivo medico a diretto contatto con la cute, il piede deve essere sempre coperto da benda o calza. Controllare frequentemente se sulla pelle si manifestano punti caldi e/o irritazioni. Se si vedono cambiamenti della pelle o si sentono fastidi, riposizionare i sistemi di fissaggio a velcro. Non utilizzare i dispositivi se sussiste una mancanza di sensibilità dovuta a situazioni post anestesia. Non camminare mai senza la suola del tutore.

Il prodotto va rilasciato e utilizzato solo dietro prescrizione medica o dietro indicazione di un operatore sanitario abilitato. I plantari multistrato SBI 3x3 (di serie su SBI Motus e SBI W-Heel), il plantare monoblocco (di serie su SBI Frame) o il plantare PLTM vanno manipolati esclusivamente da personale specializzato (medico o operatore sanitario abilitato).

Verificare sempre l'integrità dei Dispositivi ed eventualmente avvisare il Fabbricante in caso di riscontri negativi.

- Nel piede controlaterale NON lesionato è consigliabile indossare una calzatura protettiva con un'altezza della suola uguale a quella del tutore.

- Prestare attenzione in caso di deambulazione in presenza di liquidi o sostanze scivolose. In caso di soggetti con deambulazione precaria, usare appositi presidi medici di ausilio alla deambulazione quali stampelle, tripodi, deambulatori come indicato dal proprio operatore sanitario. Avvisare il Fabbricante in caso di qualsiasi reazione avversa che non è stata menzionata in questo manuale. In caso di incidente grave, avvisare il fabbricante e le Autorità Competenti. Non avvicinare il prodotto a fiamme o fonti di calore. Il prodotto può essere utilizzato unicamente da soggetti fino a 130 kg di peso corporeo.

USO IMPROPRIO

La ditta **Optima Molliter S.r.l.** non si assume alcuna responsabilità nel caso di utilizzo del prodotto nelle condizioni di seguito elencate come uso improprio. Mancata osservanza delle indicazioni terapeutiche / mancata osservanza delle prescrizioni e delle indicazioni del produttore / mancato rispetto o uso contrario alle vigenti norme di sicurezza/ significativa alterazione delle dimensioni e della forma / significativa alterazione della struttura con modifica/aggiunta di elementi / uso sportivo anche ridotto / pulizia con prodotti non idonei / pratiche che facciano del prodotto un utensile o un oggetto di giochi / conservazione non idonea / guida di automezzi durante l'utilizzo dei prodotti SBI / montaggio o smontaggio dei componenti del dispositivo effettuato da personale non qualificato / mancata osservanza delle istruzioni di montaggio o smontaggio / deambulazione senza la suola di SBI.

SCADENZA D'USO

I dispositivi, se correttamente conservati, avranno una scadenza d'uso di 5 anni. Il prodotto mantiene le proprie caratteristiche quando correttamente utilizzato e conservato nell'arco del suo ciclo vitale (mediamente una stagione/6 mesi), secondo le caratteristiche ambientali.

I plantari **SBI 3x3** e **SBI PLTM** sono soggetti ad una usura maggiore per cui la loro vita operativa è stimata intorno ai 21 giorni.

ISTRUZIONI D'USO

COMPONENTI DEL PRODOTTO



APPLICAZIONE DI SBI

Aprire gli strap e rimuovere il linguettone anteriore. Indossare la calza protettiva inclusa nel tutore. Una volta seduto inserisci il piede nel tutore posizionando il tallone nella parte posteriore di SBI.

Posiziona il linguettone (protezione tibiale **1-6**) sopra al dorso del piede e gamba facendo attenzione che la scritta **SBI** sia posizionata come nell'immagine in corrispondenza delle dita.

Chiudi gli Strap nell'ordine indicato dal n. 1 al n. 4 facendo attenzione ad inserirli nelle apposite asole.



APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI NON REMOVIBILITÀ

L'indicazione alla Non Removibilità del Tutore SBI Motus spetta unicamente al medico specialista prescrittore del dispositivo medico dopo aver valutato le condizioni cliniche del paziente. Il Sistema di Non Removibilità **NRS** deve essere applicato unicamente dal medico, dallo Specialista o dall'Operatore Sanitario Abilitato. È consigliabile separare l'unità principale **AFO (2)** dal resto del tutore prima di inserire la Fascetta di **NRS**. Ogni Tutore SBI Motus contiene nella confezione N.1 **NRS** monouso (4). Dividere la fascetta in due parti longitudinalmente, inserire la prima parte nell'apposita asola laterale del tutore indicata dalla sigla **NRS**.



Inserire la seconda parte nell'asola opposta del tutore indicante la sigla **NRS** e chiudere il primo bottone.



Chiudere il secondo bottone. Scrivere con un pennarello indelebile la data di applicazione nell'apposito spazio sulla fascetta **NRS**. Il sistema **NRS** deve essere rimosso entro 7gg e sostituito.



RIMOZIONE DELLA SUOLA

Premere contemporaneamente con la stessa mano i due pulsanti di sblocco (3), tirare quindi con l'altra mano la suola verso il basso. I punti di blocco anteriori saranno facilmente liberati.



MONTARE LA SUOLA

Posizionare la suola su una superficie piana, inserire i connettori della punta del corpo principale **AFO** o **AFO OPEN** nei due punti di blocco anteriori (8) nelle apposite feritoie della suola. A questo punto premere **SBI** verso la suola fino a sentire due "click". Assicurarsi quindi che la suola sia ancorata saldamente a **SBI**. Pericolo di scivolamento in presenza di superfici bagnate.



ISTRUZIONI PER IL TECNICO ORTOPEDICO ABILITATO

Prima di sganciare i Bottoni a vite e le Fibbie leggere attentamente le istruzioni.

SMONTARE E MONTARE BOTTONI A VITE E FIBBIE

I Bottoni a vite (**11-12**) e Fibbie (**7**) di **SBI** possono essere sganciati dall'unità principale (**2**) e riposizionati nelle apposite sedi in modo semplice e veloce.

Tuttavia è importante non sottovalutare i pericoli derivanti da montaggio e smontaggio scorretti. Ogni **SBI** ha in dotazione 8 bottoni a vite e 8 elementi dado. Rimuovere tutta la parte superiore morbida e la suola di **SBI**. Utilizzare un cacciavite (per svitare o avvitare la vite **11**) ed una chiavetta a quattro denti (per bloccare l'elemento interno femmina **12**). Girare il cacciavite in senso antiorario o orario, a seconda se si intende svitare o avvitare.



SMONTARE E RIMONTARE IL RINFORZO TIBIALE DALLA PROTEZIONE TIBIALE

Per smontare, sganciare i 3 bottoni posizionati sul rinforzo. Per rimontarlo è sufficiente riposizionarlo facendo attenzione al verso (la parte con la scritta "SBI" deve trovarsi in corrispondenza delle dita del piede) e riagganciare i 3 bottoni.



**BOTTONE
A CLIPS**

PERSONALIZZAZIONE DEL KIT PLANTARE SBI 3x3

Il sistema modulare **KIT 3x3** di serie su **SBI Motus** e **SBI W-Heel** ed opzionale su **SBI Frame**, è stato progettato per redistribuire le pressioni plantari e gestire le ulcere/lesioni da pressione dell'avampiede, mesopiede e tallone.

ATTENZIONE!!! Il KIT 3x3 deve essere personalizzato unicamente da medici, infermieri, tecnici ortopedici o personale sanitario qualificato. **ATTENZIONE!!!** Il KIT 3x3 deve essere utilizzato unicamente all'interno di SBI Motus e, SBI W-Heel (1 kit è già di serie), SBI Frame (optional). Non utilizzare mai KIT 3x3 in normali calzature o in altri tutori. Optima Molliter S.r.l. non è responsabile dell'utilizzo di KIT 3x3 in dispositivi differenti da SBI. **ATTENZIONE!!!** Il KIT 3x3 deve essere sempre utilizzato nel suo insieme con tutti i suoi componenti ben connessi tra loro all'interno del tutore SBI.

Il KIT 3x3 è composto da 9 parti connesse tra loro con un sistema a Puzzle che forma 3 solette plantari distinte. Le tre solette plantari hanno 3 densità (**ROSSO** = morbida, **BEIGE** = media, **BLU** = rigida) e possono essere combinate verticalmente ed orizzontalmente. La pressione plantare può essere redistribuita semplicemente combinando tra loro le parti. La procedura può essere fatta con semplici passaggi. Per diminuire la pressione su un'area ulcerata/lesionata il KIT 3x3 può essere personalizzato facendo una marcatura e tagliando parte delle solette plantari.

PAZIENTE SOTTO I 90 KG DI PESO

Marcare il punto plantare ulcerato/lesionato sulla soletta di colore **BEIGE**.

1. Coprire la lesione/ulcera plantare con un film sterile trasparente e tramite un rossetto o apposito pennarello da marcatura delebile marcare l'area della lesione/ulcera direttamente sopra al film trasparente (**A**). **2.** Inserire tutto il KIT 3x3 di plantari nel tutore ed assicurarsi che il plantare di colore **BEIGE** sia a contatto con il piede (**BEIGE-BLU-ROSSO**). **3.** Calzare il piede del paziente nel tutore, posizionare il linguettone tibiale e chiudere i 4 cinturini a Strap. Aiutare il paziente a fare una camminata (10 passi). In questo modo la superficie plantare sarà marcata nel punto della lesione. **4.** Aprire il tutore e rimuovere l'intero KIT 3x3. **5.** Marcare con una penna il perimetro dell'impronta con un'abbondanza di circa 6 mm intorno e 8 mm davanti (**B**).

6. Tramite un bisturi con lama da 10 mm perforare il perimetro della marcatura con una inclinazione della lama a 45° circa (**C**). **7.** Assemblare i componenti a seconda della redistribuzione di pressione voluta (Diagramma A) ed inserire tutto KIT 3x3 nel tutore SBI. **8.** Assicurarsi che la soletta **BEIGE** con il buco sia nel segmento intermedio e la soletta di colore **ROSSO** a contatto con il piede. **9.** Per evitare infezioni, proteggere sempre l'ulcera/lesione con adeguate medicazioni prima di utilizzare KIT 3x3. **10.** Applicare sempre la calza protettiva in dotazione.

PAZIENTE SOPRA I 90 KG DI PESO

Marcare il punto plantare ulcerato/lesionato sulla soletta di colore **BLU**.

1. Coprire la lesione/ulcera plantare con un film sterile trasparente e tramite un rossetto o apposito pennarello da marcatura delebile marcare l'area della lesione/ulcera direttamente sopra al film trasparente (**D**). **2.** Inserire tutto il KIT 3x3 di plantari nel tutore ed assicurarsi che il plantare di colore **BLU** sia a contatto con il piede (**BLU-BEIGE-ROSSO**). **3.** Calzare il piede del paziente nel tutore e chiudere i cinturini a Strap. Aiutare il paziente a fare una camminata (10 passi). In questo modo la superficie plantare sarà marcata nel punto della lesione. **4.** Aprire il tutore e rimuovere l'intero KIT 3x3. **5.** Marcare con una penna il perimetro dell'impronta con un'abbondanza di circa 6 mm intorno e 8 mm davanti (**E**). **6.** Tramite un bisturi con lama da 10 mm perforare sul plantare **BLU** il perimetro della marcatura con una inclinazione della lama a 45° circa (**F**). **7.** Posizionare la parte forata **BLU** sopra la corrispondente parte **BEIGE**. Marcare con una penna la base del foro conico. Effettuare quindi un foro conico anche sul plantare **BEIGE** (**G**). **8.** Assemblare i componenti a seconda della redistribuzione di pressione voluta (Diagramma B) ed inserire tutto il KIT 3x3 nel tutore. **9.** Assicurarsi che la soletta **BLU** sia nel segmento intermedio e che la soletta **BEIGE** sia nel segmento sotto e di conseguenza la soletta di colore **ROSSO** a contatto con il piede. **10.** Per evitare infezioni, proteggere sempre l'ulcera/lesione con adeguate medicazioni prima di utilizzare KIT 3x3. **11.** Applicare sempre la calza protettiva in dotazione.

PAZIENTE SOTTO I 90 KG DI PESO


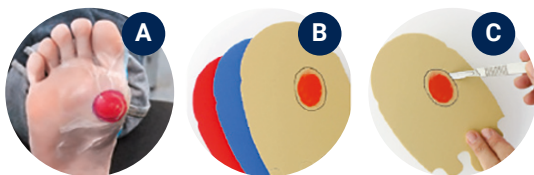


DIAGRAMMA A

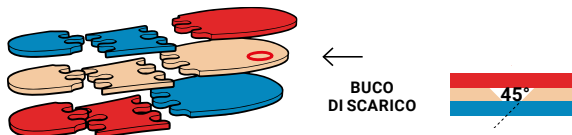

PAZIENTE SOPRA I 90 KG DI PESO


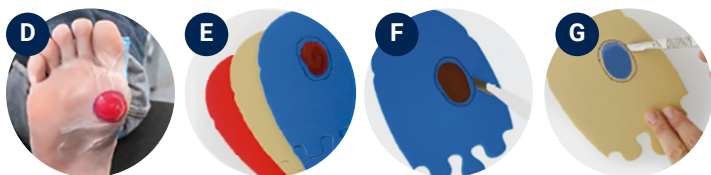


DIAGRAMMA B

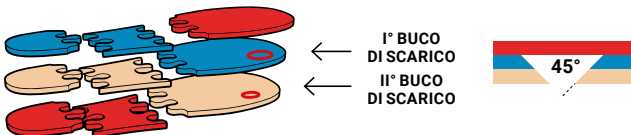

ATTENZIONE!!!

LE ZONE CON IL BUCO DI SCARICO NON VANNO MAI A CONTATTO CON L'ULCERA/LESIONE PLANTARE. NON UTILIZZARE MAI SBI SENZA IL PLANTARE IN DOTAZIONE E LA CALZA PROTETTIVA. KIT 3x3 deve essere sostituito completamente ogni 21 giorni dietro prescrizione del medico specialista (qualora l'ulcera/lesione non fosse ancora guarita). Richiedi il video del modo d'uso al seguente indirizzo email: info@optimamolliter.com oppure inquadra il QR Code.

GUIDA AL CORRETTO SCARICO PLANTARE












PAZIENTE **SOTTO I 90 KG DI PESO**

PIEDE/
FERITA

PLANTARE
1

PLANTARE
2

PLANTARE
3

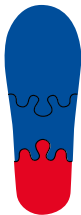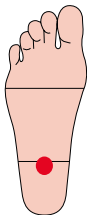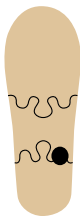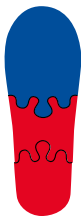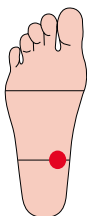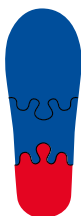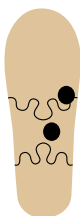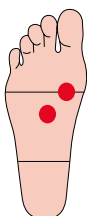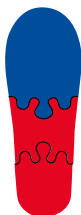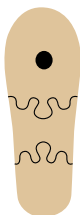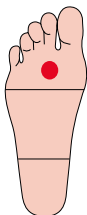

PUNTI CHIAVE

LA FERITA È SEMPRE COLLOCATA SOPRA IL PLANTARE ROSSO

PER IL PAZIENTE CON UN PESO < 90 KG EFFETTUARE 1 FORO


PER IL PAZIENTE CON UN PESO ≥ 90 KG EFFETTUARE 2 FORI

SCEGLI SEMPRE UNA TAGLIA IN PIÙ RISPETTO A QUELLA USUALE DEL PAZIENTE

DUREZZA DEI PLANTARI: **ROSSO: MORBIDO** **BEIGE: MEDIAMENTE DURO** **BLU: MOLTO DURO**

GUIDA AL CORRETTO SCARICO PLANTARE

PAZIENTE **SOPRA I 90 KG DI PESO**

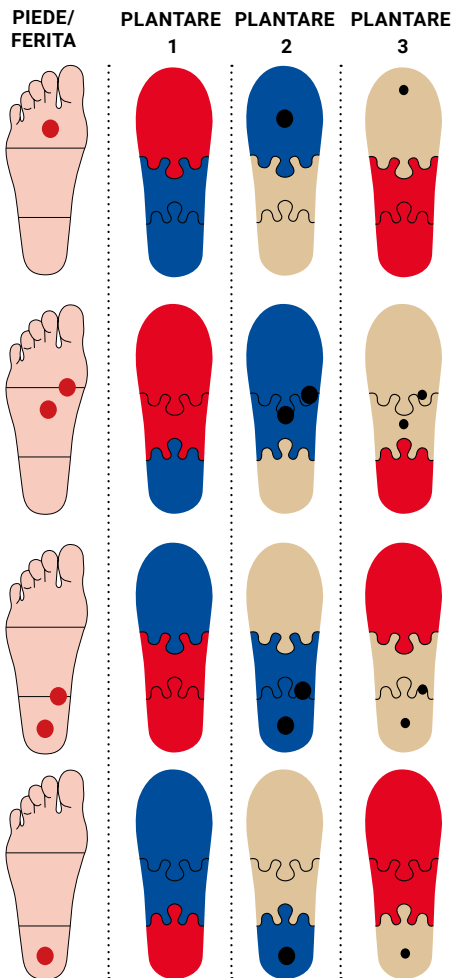

PUNTI CHIAVE

LA FERITA È SEMPRE COLLOCATA SOPRA IL PLANTARE ROSSO

PER IL PAZIENTE CON UN PESO < 90 KG EFFETTUARE 1 FORO



PER IL PAZIENTE CON UN PESO $\geq$ 90 KG EFFETTUARE 2 FORI

SCEGLI SEMPRE UNA TAGLIA IN PIÙ RISPETTO A QUELLA USUALE DEL PAZIENTE

DUREZZA DEI PLANTARI: **ROSSO: MORBIDO** **BEIGE: MEDIAMENTE DURO** **BLU: MOLTO DURO**

PREPARAZIONE DEL PLANTARE PLTM


1. Rimuovere l'adesivo sulla fascetta di velcro di colore nero che si trova nella confezione del plantare ed attaccarla sulla superficie interna di quest'ultimo. **2.** Attaccare dalla parte del velcro il materiale arancione. **3.** Posizionare il piede amputato sul plantare, facendo attenzione che tra il piede ed il materiale arancione ci sia almeno 1,5 cm di spazio. **4.** Proteggere sempre il piede e la gamba con medicazioni adeguate. Sopra le medicazioni si consiglia di indossare la calza protettiva sempre in dotazione.

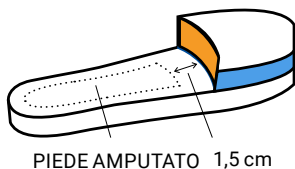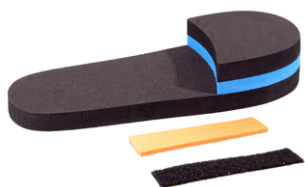

ATTENZIONE!!!

PLTM deve essere prescritto e/o indicato dal Medico Specialista e personalizzato unicamente da medici, infermieri, tecnici ortopedici o personale sanitario qualificato. PLTM deve essere utilizzato unicamente all'interno di SBI. Non utilizzare mai PLTM in normali calzature o in altri tutori. Optima Molliter S.r.l. non è responsabile dell'utilizzo di PLTM in dispositivi differenti. PLTM è stato progettato per il decorso post-operatorio dopo l'amputazione delle dita del piede o amputazione transmetatarsale.


SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO/TAGLIE

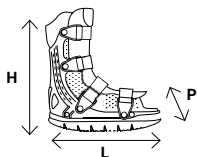

SBI	TAGLIA SIZE	S 34-36	M 37-39	L 40-42	XL 43-45	XXL 46-48
SBI MOTUS	HxLxP (cm)	33.5x26 x12	34.5x28.5 x12.8	35x30 x13.5	35x32 x14.3	37.5x34 x15.8
	PESO/WEIGHT (gr)	0.77	0.87	1.05	1.15	1.26
SBI W-HEEL	HxLxP (cm)	33.5x26 x12	34.5x28.5 x12.8	35x30 x13.5	35x32 x14.3	37.5x34 x15.8
	PESO/WEIGHT (gr)	0.74	0.85	1.03	1.13	1.2
SBI FRAME	HxLxP (cm)	33.5x26 x12	34.5x28.5 x12.8	35x30 x13.5	35x32 x14.3	37.5x34 x15.8
	PESO/WEIGHT (gr)	0.76	0.86	1.03	1.16	1.25



PLANTARE SBI 3x3	TAGLIA SIZE	S 34-36	M 37-39	L 40-42	XL 43-45	XXL 46-48
	AxBxC (cm)	23X9.5x1.8	25X10.2x1.8	27X11x1.8	29X11.9 x1.8	30.5X11.9 x1.8
	PESO/WEIGHT (gr)	66	70	80	84	94

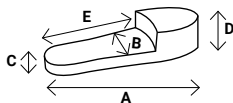

PLANTARE SBI PLTM	TAGLIA SIZE	S 34-36	M 37-39	L 40-42	XL 43-45	XXL 46-48
	AxBxCxDxE (cm)	23X9.5x1.8 x5x14.5	25X10.2x1.8 x5x16	27X11x1.8 x5x17	29X11.9x 1.8x5x18.5	30.5X11.9x 1.8x5x20.5
	PESO/WEIGHT (gr)	62	65	70	82	94

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI IN ETICHETTATURA



Marchio CE che indica la conformità alle **Direttive Cee** e numero identificativo dell'Ente Notificato (se del caso).



Indica il numero di catalogo del fabbricante in modo che il dispositivo medico possa essere identificato.



Indica il codice del lotto del fabbricante in modo che il lotto o la partita possano essere identificati.



Indica che l'apparecchio è un Dispositivo Medico (Medical Device = MD).



Dispositivo monopaziente. Indica che il dispositivo non può essere utilizzato da più di un paziente.



Indica di consultare le istruzioni per l'uso.



Indica il fabbricante del dispositivo medico.



Anno di fabbricazione.

PULIZIA DEL PRODOTTO

La pulizia del prodotto va così eseguita:

Supporto rigido **(2)**: in lavastoviglie (temperatura massima 45°) o a mano utilizzando sapone neutro e risciacquo con acqua fredda.

Rivestimenti morbidi **(1)**, suola **(9-10)**, rinforzo tibiale **(6)**: utilizzare acqua fredda e pulire con sapone neutro, risciacquare una volta completata l'operazione. Cinghie **(5)**, fibbie **(7)**, calza **(13)**: lavatrice in acqua fredda. Bottoni a vite **(11)**, elementi dado **(12)**: una volta rimossi, vanno puliti con un panno morbido ed apposito prodotto per pulizia acciaio zincato (bottoni a vite) ed apposito prodotto per ferro zincato (elementi

dado). Evitare qualunque liquido aggressivo come alcool, candeggina, ammoniac, solventi, perossidi e sbiancanti ottici. Evitare l'utilizzo di gomme abrasive, come spazzole, lana d'acciaio, carta vetro e lame di coltello per l'eliminazione delle macchie. La ditta Optima Molliter S.r.l. non è responsabile di danni provocati da prodotti abrasivi che aggrediscono i materiali e da esposizione diretta a fonti di calore. Asciugare a mano con panno morbido o all'aria lontano da fonti di calore e sole diretto. Non utilizzare asciugatori o macchine asciugatrici.

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

I materiali assemblati nei prodotti SBI sono del tipo parzialmente ecologico e pertanto necessitano di alcuni accorgimenti, nel caso di eliminazione del prodotto. Si raccomanda di non disperdere il prodotto nell'ambiente. Verificare le normative italiane e locali per lo smaltimento dei prodotti inerti e plastici. Tutte le parti sono riciclabili al 100% e smaltibili insieme alla plastica. Il packaging può essere smaltito nella plastica (sacchetti in nylon) e nella carta (parti in carta).

GARANZIA La garanzia prestata, riferita ai soli vizi dei materiali impiegati ed ai soli difetti di fabbricazione, protegge i prodotti a norma di legge. Optima Molliter S.r.l. sostituirà il prodotto o parte di esso o i suoi accessori entro sei (6) mesi dalla data di acquisto qualora ci siano difetti di fabbricazione.

La garanzia prestata non ha effetto in caso di: danni provocati dal trasporto e non contestati dall'acquirente al vettore al momento della consegna / riparazioni effettuate da soggetti diversi dal produttore / normale usura del prodotto / danni imputabili a colpa dell'acquirente, in conseguenza di un uso scorretto e/o improprio del prodotto, di un'errata manutenzione o di negligenza nella conservazione dello stesso. L'articolo, che si assume essere difettato, potrà essere restituito dal rivenditore o dal cliente solo previa autorizzazione della Optima Molliter S.r.l., alla quale dovrà essere inviata unitamente alla confezione originale ed alla prova di acquisto, ed esclusivamente in porto franco. In caso di eventuale e riconosciuta responsabilità dell'Azienda, il prodotto sarà restituito dall'Azienda al rivenditore o al cliente.

SPECIFICHE TECNICHE

ANNO DI PRODUZIONE

Come descritto sull'etichetta del frontalino della scatola

PRODUTTORE E RESPONSABILE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Optima Molliter srl - Via Breda 19/21
Civitanova Marche (Mc) Italy

CLASSE DI RISCHIO MEDICO

Classe I, secondo il Regolamento UE 2017/745

MATERIALI UTILIZZATI

Protezione Tibiale semi rigida e Fibbie: TPU
Tomaia, Protezione tibiale morbida e plantari: E.V.A.
AFO ed AFO Open: PP / Viti: acciaio zincato Dadi: ferro zincato
Suola: E.V.A. + Nylon / Velcro: Poliammide + Poliestere
Calza Protettiva: 90% Cotone, 7% Poliammide, 3% Elastam

CHIUSURA

4 velcri.

DOTAZIONE

Calza protettiva
PLANTARE SBI 3X3 con: SBI Motus/SBI W-Heel
1 NRS sistema di non removibilità con: SBI Motus

TEMPERATURE OPERATIVE E DI STOCCAGGIO

- 5° | + 45°

PACKAGING

Peso: gr 106 / Materiale: Cartone + Sacchetto in Nylon

LOTTO DI PRODUZIONE

Come descritto sull'etichetta del frontalino della scatola

I prodotti SBI sono Latex Free.



SBI MOTUS

TS-MOTUS01



SBI FRAME

TS-FRAME01



SBI W-HEEL

TS-WHEEL01



SBI 3X3

TS-OPKIT



SBI PLTM

TS-PLTM

Optima Molliter Srl Company Certified under:
ISO 9001: IT 293843-1 / ISO 13485: IT 293844-1
Via Breda 19/21 62012 Civitanova Marche (MC)
T +39 0733 801060 F +39 0733 801048
info@optimamolliter.com / www.optimamolliter.com



REV 02/2022

Tutti gli articoli sono dispositivi medici di Classe I
secondo il Regolamento UE MDR 2017/745.

